

Ruflan(ルフラン)取扱説明書

- ルフラン78cm幅／品番：MRF1078(防水)
- ルフラン83cm幅／品番：MRF1083(防水)、MRFV1083(通気)
- ルフラン91cm幅／品番：MRF1091(防水)、MRFV1091(通気)
- ルフラン83cm幅ショートサイズ／品番：MRF1083S(防水)、MRFV1083S(通気)
- ルフラン91cm幅ショートサイズ／品番：MRF1091S(防水)、MRFV1091S(通気)

注意事項




- 長期間マットの上に重量物を置かないでください。マット表面には柔らかい素材を使用していますので、跡が残る恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- マットを折りたたまないでください。変形・破損の原因となります。
- 火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

設置方法


1 マットレスを置きます

マットレスをベッドの上に置きます。

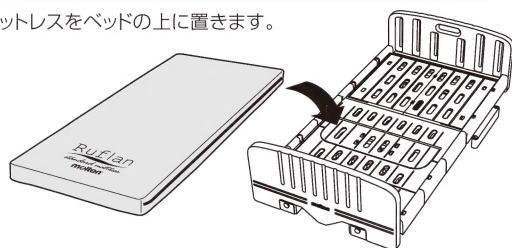

2 シーツを取り付け、ベッドメイキングをします

本体にしっかりとシーツを巻き込んでください。

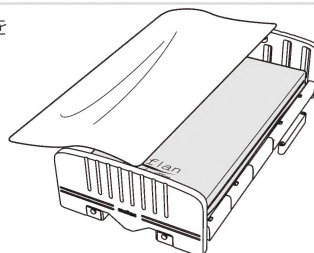

お手入れ方法

❗この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

●洗 浄


[防水タイプ]

- ① 水またはお湯を染み込ませた布で専用カバーの汚れた部分を拭き取ってください。
 - ① 汚れがひどい場合は水またはお湯で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。
(強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。)
 - ① 専用カバーは取り外して洗濯してください。
(インナーカバーは外さないでください。)
- ※専用カバーは、ソフトウレタンマットレスとロゴ印刷面が合うように取り付け、使用してください。
- ※インナーカバーの挿入口がマットレスの足元側(ロゴ印刷側)になるように設置してください。




[通気タイプ]

- ① 専用カバーは取り外して洗濯してください。
(インナーカバーは外さないでください。)
- ※専用カバーは、ソフトウレタンマットレスとロゴ印刷面が合うように取り付け、使用してください。
- ※インナーカバーの挿入口がマットレスの足元側(ロゴ印刷側)になるように設置してください。

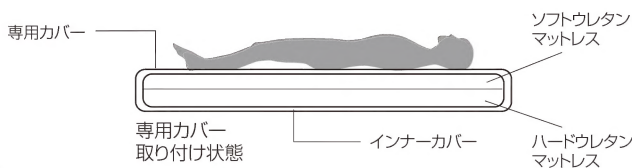

●消 毒

- ① 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
※消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用するとマット表面が劣化する恐れがあります。
- ※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
- ① 消毒装置を使用する場合は温度100℃×1時間に設定してください。
- ① 熱水消毒をする場合は温度80℃×1時間に設定してください。

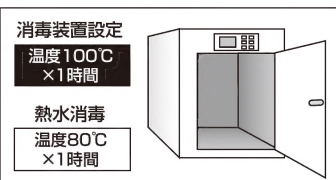

仕 様

ルフラン

ルフラン78cm幅(防水のみ)
ルフラン83cm幅
ルフラン91cm幅
ルフラン83cm幅ショートサイズ
ルフラン91cm幅ショートサイズ

- サイズ：幅78×長さ191×厚さ10cm ●重量：5.5kg
- サイズ：幅83×長さ191×厚さ10cm ●重量：6.0kg
- サイズ：幅91×長さ191×厚さ10cm ●重量：6.5kg
- サイズ：幅83×長さ180×厚さ10cm ●重量：5.5kg
- サイズ：幅91×長さ180×厚さ10cm ●重量：6.0kg

- 素 材：防水タイプ カバー表面=伸縮性ポリウレタンフィルム
通気タイプ カバー表面=ポリエステル
：マットレス=ウレタンフォーム インナーカバー=ポリエステル
- カラー：防水タイプ=ネイビー 通気タイプ=ライトパープル

開発・製造元



※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX.0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp